


Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/4press-prasa-do-porcelany-p-1080.html>

4Press - prasa do porcelany

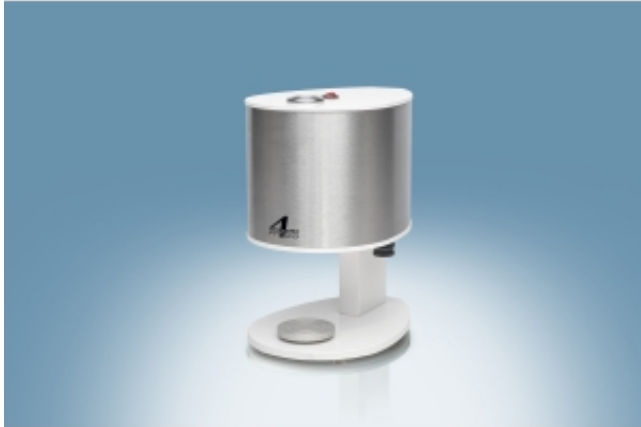

Cena **5 900,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **CRU106**

Producent **ROKO**

Opis produktu

Wtryskarka 4PRESS przeznaczona jest do wtlaczania roztopionej masy ceramicznej do form odlewowych w pracowniach techniki dentystycznej i gabinetach stomatologicznych.

Jej prosta, ale zarazem skuteczna w pracy konstrukcja, umożliwia tłoczenie dowolnej porcelany, w tym również porcelany wzmacnianej dwukrzemianem litu Empress II, czy e.Max Press.

Płynna regulacja ciśnienia zapewnia ustawienie precyzyjnych parametrów tłoczenia, a jej niewielka cena będzie doskonałą alternatywą dla tych techników, którzy nie muszą inwestować w kosztowne piece ceramiczne z funkcją press.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

PARAMETRY TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 220/230V; 50/60Hz
- zabezpieczenie sieci: 2 A
- ciśnienie robocze: 2 ÷ 8 Bar
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 270 x 167 x 167 mm
- masa: 4 kg