

TWIST

MIESZADŁA PRÓŻNIOWE




TWIST ECO



TWIST PRO



TWIST MAX

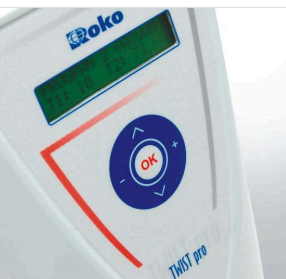

Pięć nowych konstrukcji mieszadeł próżniowych TWIST spełni wymagania każdego laboratorium dentystycznego.

Od najprostszego ECO do zaawansowanego MAX, wszystkie oferują technologię gwarantującą doskonałe rezultaty mieszania mas protetycznych.

PRECYZJA

- Wysoki poziom próżni osiągany w szybkim czasie dzięki bezolejowej lub injectorowej (wersja V) pompie.
- Motoreduktor lub bezszczotkowy silnik (MAX) rozporządza wysokim momentem obrotowym, dzięki czemu wymiesza dowolną ilość masy.
- Mikroprocesorowy programator umożliwia za-programowanie i realizację trzech etapów mieszania.
- Wstępne mieszanie w warunkach próżni, redukuje mikropęcherzyki powietrza.

TECHNOLOGIA

- Filtr zabezpiecza pompę przed pyłem i nadmiarem masy.
- Płaskodenne pojemniki wykonane są z odpornego na ścieranie tworzywa.
- Kształt łopatek zapewnia optymalizację procesu mieszania.
- Konstrukcja obudowy umożliwia wykorzystanie TWIST-a jako urządzenia ściennego lub stołowego.

PRACA

- Elektroniczny czujnik podciśnienia lub wakuometr zapewnia precyzyjną kontrolę poziomu próżni.
- 5 wielkości pojemników umożliwia dopasowanie wielkości zbiornika do ilości i rodzaju mieszanego materiału.
- Dotykowy panel sterowania oraz czytelny wyświetlacz ułatwiają pracę.
- Automatyczne mocowanie pojemników usprawnia pracę z mieszadłem.

TWIST MAX

został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologii. Stylowo zaprojektowana obudowa zawiera nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwiające osiągnięcie perfekcyjnych efektów pracy.

TWIST PRO

wyposażono w mikroprocesorowy programator z pamięcią na 10 programów, który umożliwia wykonanie mieszania wstępnego już w warunkach próżni.

TWIST ECO

jest profesjonalnym mieszadłem próżniowym, w którym zastosowano nowe koncepcje konstrukcyjne: pompy Venturiego (w wersji V) oraz motoreduktora.

TWIST M

składa się z pompy próżniowej oraz pojemników wyposażonych w korbę. Pompa zapewnia należyty poziom próżni, proces mieszania jest realizowany ręcznie.



TWIST M

POJEMNIKI

	DANE TECHNICZNE			
	TWIST ECO	TWIST PRO	TWIST MAX	TWIST M
Wysokość	350 mm	350 mm	310 mm	110 mm
Szerokość	150 mm	160 mm	370 mm	160 mm
Głębokość	230 mm	230 mm	260 mm	220 mm
Moc	200W	200W	200W	100W
Obroty	360 obr/min	360 obr/min	360 obr/min	-
Pojemność pojemników	250/500/1000 ml	250/500/1000 ml	250/500/1000 ml	250/500/1000 ml
Napięcie znamionowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Waga	8 kg	8 kg	8 kg	2,5 kg

Roko
P O L S K A

ul. Bór 177
42-200 Częstochowa

tel./fax +48 34 369 78 21
tel. +48 34 365 93 51
tel. kom. +48 602 296 468

e-mail: rokodental@vp.pl

www.rokodent.pl