

ROTOMAT & ROTOCAST

WIÓRKA ELEKTRYCZNA


ODLEWNIA INDUKCYJNA



ROTOMAT



ROTOCAST

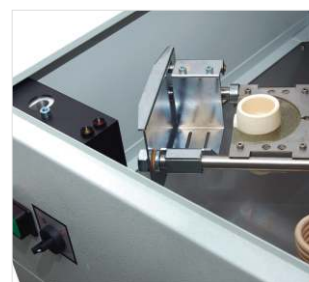

dental systems

Odlewnia indukcyjna ROTOCAST i wirówka elektryczna ROTOMAT przeznaczone są do odlewania form odlewniczych. Doskonale sprawdzają się w odlewaniu stopów stali, jak i stopów metali szlachetnych.

BEZPIECZEŃSTWO

- Półprzewodnikowy generator nie emituje szkodliwego promieniowania i gwarantuje użytkownikowi pełnię bezpieczeństwa.
- Rygiel przeciwwyważeniowy blokuje pokrywę oraz odłącza zasilanie po otwarciu odlewni.
- Elektromagnetyczna blokada uniemożliwia otwarcie pokrywy w czasie wirowania.
- Ochronę bierną użytkownika zapewnia masywną, stabilną konstrukcją.

TECHNOLOGIA

- Generator ROTOCAST-a wykorzystuje najnowszej generacji układ tranzystorów mocy.
- Generator HF z mikroprocesorowym sterowaniem, umożliwia podłączenie odlewni do jednofazowego gniazda 220/230 V.
- Dzięki innowacyjnej technologii, ROTOCAST posiada wysoką sprawność, pobierając niewielką moc - topi do 100 gram stopu.
- Specjalny układ stabilizacyjny dostosowany do polskiej sieci energetycznej zwiększa odporność na zakłócenia sieci.

PRACA

- Elektroniczny układ kontrolny wykrywa sytuacje grożące awarią i zabezpiecza urządzenie przed zniszczeniem.
- Kwarcowa osnowa spirali indukcyjnej zabezpiecza ją przed uszkodzeniem.
- Automatyczny system wyważania ramienia ułatwia codzienną eksploatację.
- Mechanizm opuszczania spirali wyposażono w blokady zmniejszające ryzyko podniesienia spirali w trakcie wirowania ramienia.

ROTOCAST

jest indukcyjną odlewnią odśrodkową, wyposażoną w najnowszej generacji, półprzewodnikowy generator wysokiej częstotliwości – HF. Charakteryzuje się wysokim stopniem uniwersalności. Umożliwia skuteczne odlewanie protez szkieletowych czy rozległych mostów ze stali oraz prac ze stopów szlachetnych.

W połączeniu ze sprawdzonym układem napędowym, podoła każdemu zadaniu jakie przed nią postawi użytkownik.

ROTOMAT

wirówka elektryczna, została zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem parametrów odlewania stopów stali. Dzięki dużej sile odśrodkowej i mocnemu momentowi obrotowemu, uznawana jest za jedną z najsukcesywniejszych odlewni elektrycznych.

Rotomaty od ponad 15 lat pracują w najcięższych warunkach, można mieć absolutną pewność co do ich niezawodności i wytrzymałości.



ZESTAW DO TOPIENIA

DANE TECHNICZNE		
	ROTOMAT 2	ROTOCAST
Obroty	600 obr/min	600 obr/min
Wysokość	350 mm	550 mm
Szerokość	660 mm	600 mm
Głębokość	600 mm	600 mm
Napięcie znamionowe	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	550 W	2500 W
Zabezpieczenie	10A	16A
Waga	50 kg	50 kg

Roko
P O L S K A

ul. Bór 177
42-200 Częstochowa

tel./fax +48 34 369 78 21
tel. +48 34 365 93 51
tel. kom. +48 602 296 468

e-mail: rokodental@vp.pl

www.rokodent.pl