


COBRA

PIASKARKI





COBRA MIX2

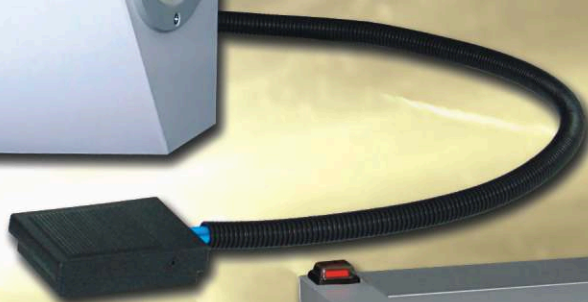

COBRA 4P



COBRA S

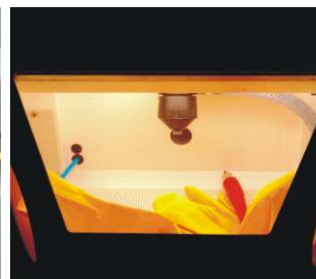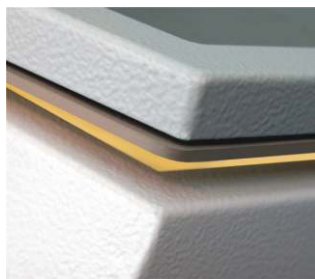

The logo for Roko dental systems, featuring a stylized globe icon followed by the word "Roko" in a bold, blue, sans-serif font.

dental systems

Piaskarki serii COBRA to praktyczne urządzenia przeznaczone do czyszczenia i przygotowania powierzchni prac protetycznych. Koncepcja piaskarek została tak przemyślana aby zoptymalizować ich skuteczność, prostotę i wytrzymałość.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zaprojektowana specjalnie dla piaskarek COBRA uszczelka, skutecznie ogranicza wydostawanie się pyłów.
- Rękawice ochronne są odporne na działanie strumienia piasku i w pełni zabezpieczają dłoń technika.
- Siatka ochronna zabezpiecza szybę przed nadmiernym zużyciem.
- Elektroluminescencyjne oświetlenie dokładnie oświetla pole pracy.

TECHNOLOGIA

- Pneumatyczne elementy wykonawcze dają gwarancję niezawodnej pracy.
- Dysze wykonane są z węgla o podwyższonej odporności na ścieranie.
- Układ cyrkulacji powietrza wewnątrz komory zmniejsza straty piasku do 50 %.
- Konstrukcja injektora zapewnia jednolity, pozabawiony efektu „pulsowania” strumień piasku.

PRACA

- Modułowa konstrukcja umożliwia samodzielną rozbudowę piaskarki w dowolnym okresie eksploatacji.
- Sito rozdzielające komorę chroni dyszę przed zablokowaniem odłamami masy.
- Masywne zbiorniki z transparentnego tworzywa gwarantują wytrzymałość i trwałość konstrukcji.
- Filtr z reduktorem precyzyjnie reguluje ciśnienie oraz chroni piasek przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

COBRA S

jest piaskarką stacjonarną przeznaczoną do oczyszczania odlanej z metalu pracy z pozostałości masy osłaniającej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji modułu dyszy, piaskarka charakteryzuje się niewielkim poborem powietrza i efektywną pracą już od 4 atm.

COBRA P

to rodzina piaskarek piórowych. Cztery moduły oraz trzy rozmiary dysz, zapewniają pełne spektrum możliwości piaskowania piaskiem korundowym jak i szklanymi perełkami o dowolnej wielkości ziarna.

COBRA MIX

to wielofunkcyjne piaskarki, które na niewielkiej przestrzeni łączą precyzję piaskarek piórowych z wydajnością piaskarek stacjonarnych. Te zalety predysponują piaskarki COBRA MIX jako idealnego partnera dla niewielkich, rozwijających się laboratoriów dentystycznych.

COBRA M

jest modułem piaskarki piórowej umożliwiającym precyzyjne piaskowanie, zapewnia profesjonalną technologię przy zachowaniu mobilności urządzenia.



DANE TECHNICZNE	COBRA									
	M	S	P	2P	MIX	MIX2P	3P	4P	MIX3P	MIX4P
Wysokość	270	320		350				350		
Głębokość	210	360		410				510		
Szerokość	110	390		470				470		
Waga	2kg	7kg	8kg	9kg	8kg	9kg	10kg	11kg	10kg	11kg
Napięcie znamionowe	-	230V/50HZ		230V/50HZ				230V/50HZ		
COBRA	M	S	P	2P	MIX	MIX2P	3P	4P	MIX3P	MIX4P
Ilość dysz piórowych	1	0	1	2	1	2	3	4	3	4
Ilość dysz stacjonarnych	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
DYSZE	STACJONARNA					PIÓROWE				
Ciśnienie pracy	4-6 bar					2-4 bar				
Rozmiar dysz	Ø 3mm					Ø 0.75, 1.00, 1.20 mm				

Roko
P O L S K A

ul. Bór 177
42-200 Częstochowa

tel./fax +48 34 369 78 21
tel. +48 34 365 93 51
tel. kom. +48 602 296 468

e-mail: rokodental@vp.pl
www.rokodent.pl