



FORMAX & GRIMAX

URZĄDZENIA POMOCNICZE

FORMAX
REF. FP



PINAX
REF. PI

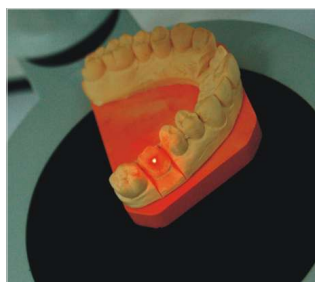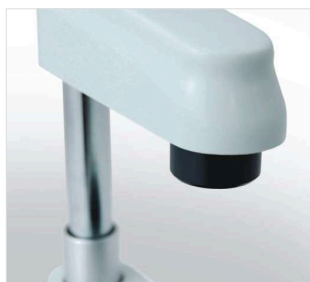

FORMAX, PINAX i GRIMAX to rodzina wielofunkcyjnych urządzeń pomocniczych, przeznaczonych do obróbki mechanicznej lub termicznej materiałów dentystycznych, takich jak tworzywa sztuczne, gipsy czy ceramika.

FORMAX

jest urządzeniem do podciśnieniowego formowania szyn wybielających, relaksacyjnych, ochronnych, łyżek indywidualnych i aparatów ortodontycznych. Dzięki swoim walorom technicznym i estetycznym sprawdza się w laboratorium jak i w gabinecie stomatologicznym.

- Elektroniczny układ określa czas potrzebny do rozgrzania płytki.
- Ceramiczny promiennik gwarantuje równomierne rozgrzewanie płyty na całej powierzchni.
- Automatyczny układ sterujący wyłącza urządzenie chroniąc turbinę przed przegrzaniem.
- Siła podciśnienia turbiny umożliwia skutecznie formowanie płytek o grubości nawet 4 mm
- Czujnik położenia ramki zapewnia automatyczny start podciśnienia.

PINAX

pozwała na wykonanie precyzyjnych i funkcjonalnych modeli składanych, nawet w wypadku skomplikowanych prac. Stosowanie nowoczesnych urządzeń do nawiercania takich jak PINAX sprawia, że praca przy produkcji modeli składanych staje się szybka i wydajna.

- Ruch stolika jest płynny dzięki precyzyjnym łożyskom zapewniającym dokładność i powtarzalność nawierceń.
- Dynamiczny silnik umożliwia nawiercanie w każdym, nawet najtwardszym gipsie i tworzywie sztuczne.
- Kalibrowany promień lasera idealnie zaznacza miejsce nawiercania.
- Zasobnik na pył zabezpiecza elementy silnika i sprzęgła przed zapyleniem oraz ułatwia usunięcie pyłu.
- Płynna regulacja głębokości zapewnia dokładność nastawy do 0,1 mm.

GRIMAX

zwiększa szybkość wykonywania modeli dzielonych. Jego zadaniem jest wyrównywanie krawędzi łuków zębowych przed nawiercaniem na pinarce oraz zwiększenie estetyki wykonywanych modeli.

- Przyłącze do wyciągu zapewnia odsysanie pyłów powstających podczas frezowania.
- Wysoka moc napędu umożliwia sprawną obróbkę każdego gipsu.
- Konstrukcja uchwytu gwarantuje idealne centrowanie i uzyskiwanie precyzyjnych linii frezowania.
- Sztwna konstrukcja oraz szeroki rozstaw nóżek gwarantują stabilne umocowanie.
- Amortyzatory silnika tłumią drgania i poprawiają precyzję frezowania.

PRASA HYDRAULICZNA
REF. PH



DANE TECHNICZNE			
	FORMAX	PINAX	GRIMAX
Wysokość	330mm	340mm	180mm
Szerokość	220mm	160mm	160mm
Głębokość	220mm	220mm	220mm
Moc	1500W	120W	150W
Waga	6kg	6kg	6kg
Napięcie znamionowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz

Roko
P O L S K A

ul. Bór 177
42-200 Częstochowa

tel./fax +48 34 369 78 21
tel. +48 34 365 93 51
tel. kom. +48 602 296 468

e-mail: rokodental@vp.pl

www.rokodent.pl