


Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/pinax-pro-v-30-pinarka-protetyczna-p-1165.html>

## PINAX PRO v 3.0 - pinarka protetyczna

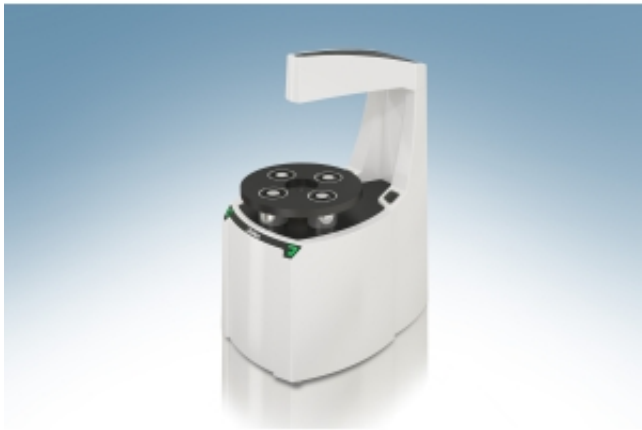

Cena **6 900,00 zł**

Cena poprzednia **7 500,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **GPU130**

Producent **ROKO**

### Opis produktu

**PINAX PRO** przeznaczony jest do osadzania sztyftów (pinów) w prefabrykowanych płytkach bazowych oraz modelach gipsowych. Koncepcja PINAX-a została tak przemyślana aby zoptymalizować jego skuteczność, obsługę i wytrzymałość .

- **perfekcyjnie skalibrowany promień lasera** idealnie zaznacza miejsce nawiercania, moc lasera zapewnia widoczność punktu na każdym rodzaju i kolorze masy wyciskowej
- **precyzyjne prowadzenie mechanizmu posuwu wiertła** zapewnia dokładność i powtarzalność nawierceń
- **bezszcotkowy i szybkoobrotowy silnik** umożliwia sprawne nawiercanie w każdym, nawet najtwardszym gipsie i tworzywie sztucznym
- **automatyczna blokada uchwytu płytki bazowej i nawiercanie** jest uruchamiane w chwili naciśnięcia włącznika nawiercania

#### WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

[www.rokodent.pl](http://www.rokodent.pl)

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

- napięcie zasilania - 220/230 V; 50 Hz
- moc znamionowa - 38 W
- obroty - 3600 1/min
- klasa lasera - 3
- długość fali - 655 nm
- moc lasera - 2,5-4,5 mW
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 390 x 190 x 270 mm
- waga - 6,5 kg

**Gwarancja - 3 lata**

#### WYPOSAŻENIE:

- Pinarka PINAX PRO
- Uchwyt płyty bazowej
- Uchwyt mocujący
- Wiertło
- Kabel zasilający
- Klucz do wymiany wiertła
- Klucz do regulacji wiertła

- 
- Instrukcja użytkownika
  - Karta gwarancyjna
  - Deklaracja zgodności CE